

# ProCare

## Lab 10 MA



### Verwendung:

ProCare Lab 10 MA ist ein flüssiges, alkalisches Reinigungsmittel zur maschinellen Reinigung von Laborglas und Laborutensilien in Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsautomaten (Flüssigkonzentrat).

### Hauptanwendungsbereiche:

ProCare Lab 10 MA findet universellen Einsatz in medizinischen, biologischen und chemischen Laboratorien.

### Produkteigenschaften:

- vielseitig einsetzbares Reinigungsmittel mit hoher Materiaschonung und gutem Reinigungsvermögen für organische Verunreinigungen wie beispielsweise gegenüber Blut, Eiweiß und Nährbodenresten
- frei von Oxidationsmitteln und Tensiden
- ProCare Lab 10 MA kann bei allen Wasserhärten eingesetzt werden.

### geeignet für:


Edelstahl, Laborglas, Keramik, Kunststoff<sup>1</sup> (PE, PP, PVDF, PTFE)

### bedingt geeignet für:

nicht eloxiertes Aluminium und Buntmetalle (ist auf Beständigkeit vorzuprüfen)

### nicht geeignet für:

eloxiertes Aluminium

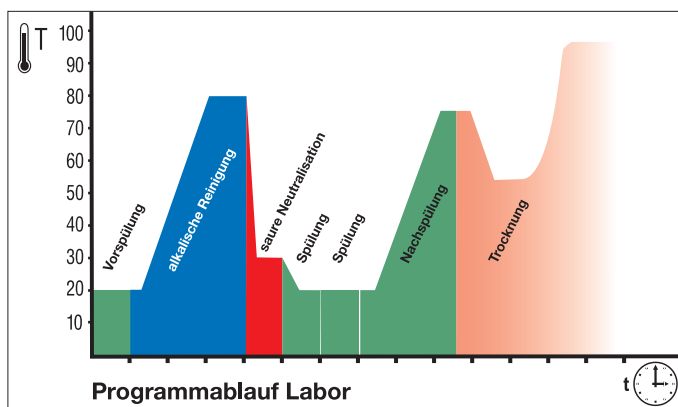

### Beispiel Programmablauf Labor:

- **Vorspülung:** Kaltwasser, ohne Aufheizen, ohne Prozesschemikalien
- **Reinigung:** Kalt- / Warmwasser, mit Aufheizen, mit alkalischen Reinigungsmitteln
- **Neutralisation:** Kalt- / Warmwasser, ohne Aufheizen, mit sauren Neutralisationsmitteln
- **Mehrere Spülungen:** Kalt- / Warmwasser oder vollentsalztes Wasser / Reinstwasser, ohne Aufheizen
- **Nachspülung:** vollentsalztes Wasser / Reinstwasser, mit Aufheizen
- **Trocknung**

### Anwendung und Dosierung:

Miele ProCare Lab 10 MA ist abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsautomaten.

- Exakte und ökonomische Dosierung über eine Dosierpumpe
- Anwendungskonzentration: Die Dosiermenge ist vom Verschmutzungsgrad des Spülgütes abhängig und beträgt 2-4 ml/l.
- Im Programmschritt „saure Neutralisation“ ist zur Neutralisation verschleppter Alkalireste der Einsatz von ProCare Lab 30 P oder ProCare Lab 30 C vorzusehen.
- Für die Dosierung sind geeignete Dosiergeräte zu verwenden.
- Mindestdosiertemperatur  $\geq 15^{\circ}\text{C}$ , empfohlene max. Anwendungstemperatur  $\leq 95^{\circ}\text{C}$

### Bitte beachten!

- Die ProCare Lab 10 MA-Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser (vorzugsweise vollentsalzt) abzuspülen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.
- Zur Vermeidung von Wasserflecken ist die Verwendung von vollentsalztem Wasser in der Schlußspülung zu empfehlen.
- Bitte beachten Sie die Reinigungsempfehlungen des Laborglaserstellers.

- Die Bedienungsanweisungen der Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsautomaten sind zu beachten.
- Nur für gewerbliche Anwendungen.

<sup>1</sup>Kunststoffe, die gemäß Herstellerangaben für die alkalische, maschinelle Reinigung geeignet sind.

# ProCare

## Lab 10 MA



### Technische Daten:


- Dichte (20° C): ca. 1,5 g/cm<sup>3</sup>
- pH-Wert (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20° C) 2 bis 4 ml/l: ca. 11,6 bis 11,8

### Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG- Detergenzienverordnung 648/2004:

- 15 - 30 % Phosphate

### Lagerhinweise:

- Einzuhaltende Lagertemperatur: -15 bis 30 °C einzuhalten.
- Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre verwendbar.
- Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

### Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter [www.miele-professional.de](http://www.miele-professional.de) verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

### Lieferbare Verpackungseinheit und Zubehör

Bezeichnung	Gebinde	Materialnummer
ProCare Lab 10 MA	5l Kanister	10265670
ProCare Lab 10 MA	10l Kanister	10265680
Kanisterschlüssel	für 5l und 10l Kanister	9066810

### Kontaktdaten:

#### Deutschland

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh  
Telefon 0 800 22 44 666  
[www.miele-professional.de](http://www.miele-professional.de)

#### Luxemburg

Miele S.à r.l.  
20, Rue Christophe Plantin  
Luxembourg-Gasperich  
Telefon +352/497 11-25  
[infolux@miele.lu](mailto:infolux@miele.lu)

#### Importeur für die Schweiz:

Miele AG  
Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach



#### Deutschland

Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
20539 Hamburg  
[www.drweigert.de](http://www.drweigert.de)